

ENDO-MATE DT2 Standaard Sets



ENDO-MATE DT2 met 20:1 kop

MODEL
ENDO-MATE DT2 (230V)

REF
Y1004230

- Bedieningseenheid • Motor en snoer • Kop MP-F20R (20:1)
- Steun handstuk • Transformator

ENDO-MATE DT2 zonder kop

MODEL
ENDO-MATE DT2 W/O (230V)


REF
Y1004231

- Bedieningseenheid • Motor en snoer
- Steun handstuk • Transformator

Specificaties

- Voeding : AC 230 V 50/60 Hz en batterijpakket
- Aantal programma's : 9
- Maximaal koppel : 7 Ncm (met gebruik van de kop 20:1)
- Snelheden : 100-13.000 min⁻¹ (met koppen 20:1, 1:1)
- Laadtijd/continu gebruik : 5 h/2 h (naargelang de werklast)
- Afmetingen : B 93 x D 147 x H 100 (mm)
- Gewicht : body 440 g / micromotor & snoer 95 g

Koppen

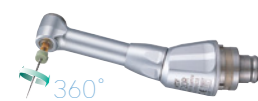

MODEL
20:1 MP-F20R
16:1 MP-F16R

REF
Y110044
Y110096

- Mini-kop • 20:1 / 16:1 Reductie
- Voor NiTi vijlen (ø2,35) • Drukknop



16:1 MPA-F16R

Y110097

- Mini-kop • 16:1 Reductie
- Voor Ni-Ti vijlen (ø2,35) • Drukknop
- Apex Finder aansluiting (Voor lange vijlen)



20:1 MPAS-F20R
16:1 MPAS-F16R

Y110046
Y110098

- Mini-kop • 20:1 / 16:1 Reductie
- Voor Ni-Ti vijlen (ø2,35) • Drukknop
- Apex Finder aansluiting (Voor korte vijlen)

ENDO-MATE DT2 Motor en snoer



MODEL	PRODUCTEN	REF
ENDO-MATE DT2 Bedieningseenheid		U1138001
ENDO-MATE DT2 Motor en snoer		E1169001
ENDO-MATE DT Transformator		U480
Steun handstuk		Z095205

MODEL	PRODUCTEN	REF
Snoer Voor MPA / MPAS		C876021
Clip Voor Verbindings snoer		C876509
Herlaadbare batterij		U421070
F-Type opzetstuk		Z256090



De koppen zijn wasbaar in de thermodesinfector.



De koppen zijn autoclaveerbaar tot 135°C.

NSK

CREATE IT.

slim en draagbaar

ENDO-MATE DT2

ENDODONTISCHE MICROMOTOR





ENDO-MATE DT2

ENDO-MATE DT2 is te gebruiken met alle bekende merken van Ni-Ti vijlen. De pre-programmeringsfunctie garandeert uiterst efficiënte behandelingen gebruik makend van de protocollen van verschillende vijlfabrikanten. De controle eenheid is compact en licht. Het beschikt over een oplaadbare batterij waardoor het zeer mobiel is. Het lichte en slanke handstuk is comfortabel om mee te werken en staat in voor hoogkwalitatief werk.

Kenmerken van ENDO-MATE DT2

1. Geschikt voor alle merken NiTi vijlen
2. Koppelcontrole en automatische inversie
3. Compacte uitvoering
4. Dubbele stroomvoorziening (snoer/oplaadbare batterijen)
5. Licht en ergonomisch handstuk

Werkt met alle populaire merken van Ni-Ti- vijlen

Tot 9 instellingen (toerental en koppel etc) kunnen eenvoudig worden geprogrammeerd dmv de geheugenfunctie knop. Het is gemakkelijk te schakelen tussen de verschillende programma 's waardoor men kan werken volgens de vereiste protocollen van alle vijl-fabrikanten.

Versnelling	Rotatiesnelheid (min ⁻¹)
20:1	100-650
16:1	125-800

Auto-omkeerfunctie


De automatische reverse-functie wordt geactiveerd wanneer het vooraf ingestelde koppelniveau is bereikt.

Dubbele voeding

ENDO-MATE DT2 beschikt over oplaadbare batterijen voor draagbaarheid of kan aangesloten worden op electriciteitsnetwerk.

Andere functies

Een biepgeluid weerklinkt wanneer voor ingesteld koppel bereikt is.

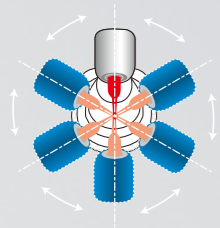

6 kophoeken voor eenvoudige behandeling

Afhankelijk van de positie van de behandlungszone, kan de kophoek worden aangepast.



Snelle koppeling

De snelkoppeling zorgt voor een snelle uitwisseling van koppen. Alle koppen zijn autoclaveerbaar tot 135°C.



2-weg aan / uit schakelaar

Kenmerken zijn :

- A: Push en loslaten - Micro Motor werkt continu tot de toets opnieuw wordt ingedrukt.
- B: Duw en houd - Micro Motor werkt continu totdat de knop wordt losgelaten.

Druktoetsen / Ultraminiatuurkop

Garandeert snelle en gemakkelijke uitwisseling van vijlen gedurende de procedures. De compacte kop biedt uitstekend zicht tijdens de behandeling.



* Ware grootte

Lichtgewicht, slank en ergonomisch handstuk.